



# Acrílicos de ortodoncia.

Colores vivos: variedad fascinante.



DENTOURUM  
**ONLINE  
SHOP**  
[shop.dentaurum.com](http://shop.dentaurum.com)

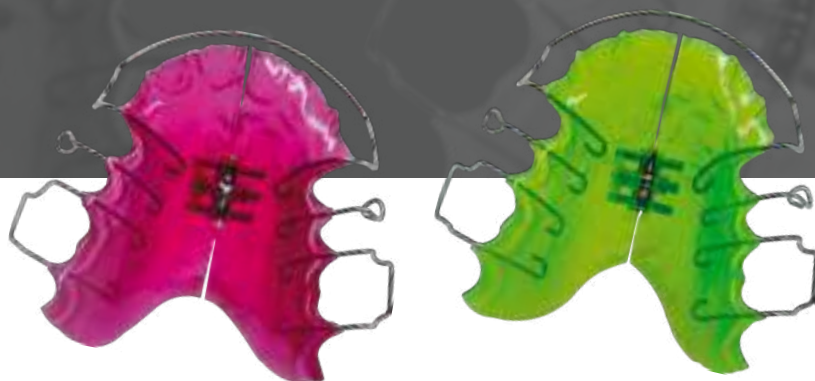


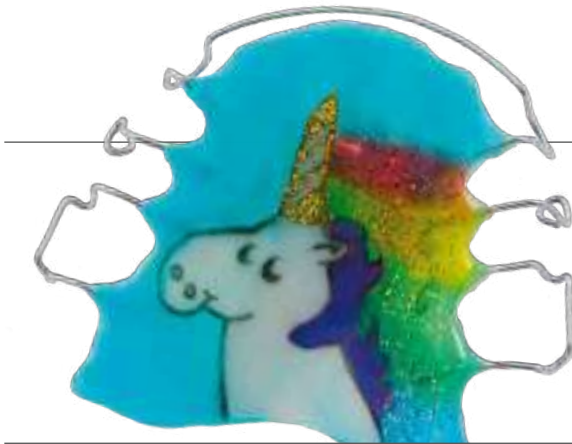

### El sistema de acrílicos versátil.

Orthocryl® es un éxito en laboratorios ortodónticos desde hace más de 50 años. Une excelentes características técnicas y un manejo sencillo desde hace décadas.

La creatividad del procesado no conoce límites. Ya sea en negro, en blanco o multicolor, Orthocryl® ofrece una libertad de diseño óptima gracias a la variedad de colores vivos, las micas Disco y figuritas. Además del autopolimerizable en frío convencional, Orthocryl® también está disponible en una versión fotopolimerizable. Orthocryl® LC se diseñó, sobre todo, para cumplir con las exigencias de la fabricación de aparatos ortodónticos. Es fotopolimerizable, ahorra tiempo y es fácil de manipular.

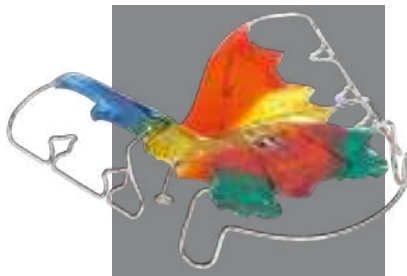

---

### Orthocryl® LC

El acrílico fotopolimerizable.

---

### Orthocryl®

Adaptado para la técnica de rociado.

---

### Orthocryl® Neon

Colores luminosos.

---

### Orthocryl® EQ

Adaptado para la técnica de mezcla  
polvo y líquido.

---

### Orthocryl® black & white

Rico en contrastes y variado.

---

**Amplia gama  
de accesorios comprobados**  
Todo de una misma empresa.

---



# Orthocryl® LC

El acrílico fotopolimerizable para la ortodoncia.



## Todo menos corriente.

El acrílico ortodóntico moderno Orthocryl® LC impresiona con nuevas ventajas: es fotopolimerizable, ahorra tiempo y es fácil de manipular. Orthocryl® LC está diseñado especialmente para cumplir con las exigencias de la ortodoncia en la fabricación de aparatos ortodónticos. Dicho esto, se presta también a la producción de guías de fresado para la implantología, placas de mordida y aparatos antirronquido especiales en solo unos minutos y con poco esfuerzo.

Orthocryl® LC es exclusivo, único y diferente a todo lo que podrá encontrar en el mercado por su novedad. Un auténtico producto premium que aporta valor añadido.

## Ventajas:

- Uso sencillo.
- Ahorra tiempo y material.
- Fluidez perfectamente estructurada.
- Amplio campo de aplicación.
- Completamente inodoro.
- Biocompatible.




## Muy fácil de usar y flexible.

La aplicación de Orthocryl® LC es sumamente fácil. El producto se suministra listo para su uso, en cartuchos negros y opacos. Ya no necesita una preparación laboriosa, pues no tiene que mezclar o rociar el acrílico.

El material se aplica directamente del cartucho al modelo preparado anteriormente. El inyector correspondiente permite una dosificación precisa. Este sencillo manejo no solo ahorra tiempo en la fabricación y el acabado, sino también material.

Gracias a su fluidez perfectamente estructurada, Orthocryl® LC puede adaptarse de forma muy eficiente al modelo de yeso preparado.

Orthocryl® LC está disponible en seis colores vivos. Con las diversas micas Disco y numerosas figuritas de la exhaustiva gama de Orthocryl®, cada aparato se convierte en una pieza única.

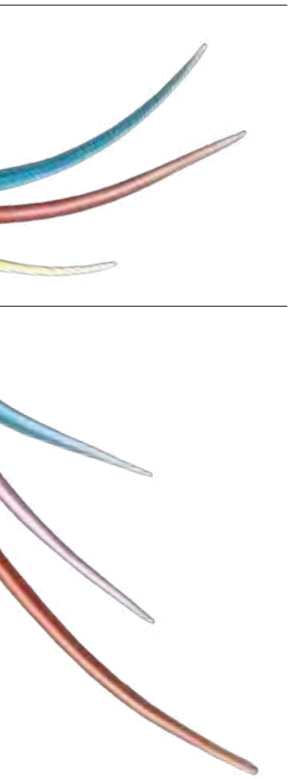

## Orthocryl® LC / Kits de inicio



### Kit de inicio Orthocryl® LC

Acrílico fotopolimerizable.

<b>REF 160-400-00</b>	1 surtido
-----------------------	-----------

CC 0483

**Contenido:**

1 x Orthocryl® LC, incoloro	REF 160-401-00
1 x Orthocryl® LC, rosa transparente	REF 160-402-00
1 x Orthocryl® LC, rojo	REF 160-403-00
1 x Orthocryl® LC, azul	REF 160-404-00
1 x Orthocryl® LC, amarillo	REF 160-405-00
1 x Orthocryl® LC, verde	REF 160-406-00
1 x Inyector para Orthocryl® LC	REF 160-420-00
50 x Puntas de cartucho para Orthocryl® LC	REF 160-421-00



### Kit de inicio Orthocryl® LC, incoloro

Acrílico fotopolimerizable.

<b>REF 160-400-20</b>	1 surtido
-----------------------	-----------

CC 0483

**Contenido:**

6 x Orthocryl® LC, incoloro	REF 160-401-00
1 x Inyector para Orthocryl® LC	REF 160-420-00
50 x Puntas de cartucho para Orthocryl® LC	REF 160-421-00

### Orthocryl® LC

Acrílico fotopolimerizable en cartuchos opacos.

Color	REF	Cantidad
incoloro	160-401-00	30 g
rosa transparente	160-402-00	30 g
rojo	160-403-00	30 g
azul	160-404-00	30 g
amarillo	160-405-00	30 g
verde	160-406-00	30 g



CE 0483



## Orthocryl® LC / Accesorios



### Pasta de mordida

Para Orthocryl® LC.

Color	REF	Cantidad
transparente	160-410-00	50 g

CE 0483



### Inyector

Para Orthocryl® LC.

REF 160-420-00	1 pieza
----------------	---------



### Puntas de cartucho

Para Orthocryl® LC.

REF 160-421-00	50 piezas
----------------	-----------



### Líquido de limpieza

Para Orthocryl® LC.

REF 160-430-00	100 ml
REF 160-431-00	1.000 ml



### Soporte para cartucho

Para Orthocryl® LC. Apropiado para 6 cartuchos.

Material: policarbonato

No apropiado para utilizar con sustancias desinfectantes con contenido de etanol o alcohol.

Dimensiones: ca. 170 x 110 x 110 mm (anchura x altura x profundidad)

Color	REF	Cantidad
transparente, incoloro	160-422-00	1 pieza



### Barniz aislante

Aislante especial a base de alginato para modelos de yeso, formándose una fina película aislante, resistente a la abrasión.

#### Aisla:

- yeso contra acrílicos
- yeso contra yeso

Color	REF	Cantidad
rosa	162-800-00	1.000 ml



### Surtido Orthocryl®

REF 161-912-00	1 surtido
<b>CE 0483</b> <b>Contenido:</b>	
1 kg Polvo (polímero) Orthocryl®, incoloro	REF 160-112-00
500 ml Líquido (monómero) Orthocryl®, incoloro	REF 161-100-00
1.000 ml Barniz aislante	REF 162-800-00
2 x Frasco para rociar	REF 162-100-00
1 x Vaso graduado para mediciones	REF 162-200-00
1 x Embudo	REF 162-600-00
1 x Boquilla para rociar polvo (polímero)	REF 162-751-00
1 x Aguja para rociar líquido (monómero)	REF 162-752-00



### Orthocryl®

Estuche pequeño de polvo (polímero) y líquido (monómero)

Color	REF	Cantidad
rosa transparente	<b>160-501-00</b>	200 g + 100 ml
incoloro	<b>160-502-00</b>	200 g + 100 ml

CE 0483



### Surtido Orthocryl® multicolor

REF 160-600-00	1 surtido
<b>CE 0483</b> <b>Contenido:</b>	
1 kg Polvo (polímero) Orthocryl®, incoloro	REF 160-112-00
250 ml Líquido (monómero) Orthocryl®, rojo	REF 161-127-00
250 ml Líquido (monómero) Orthocryl®, verde	REF 161-128-00
250 ml Líquido (monómero) Orthocryl®, azul	REF 161-129-00
250 ml Líquido (monómero) Orthocryl®, amarillo	REF 161-130-00
1 x Embudo	REF 162-600-00



### Surtido Orthocryl® Neon

Acrílicos de colores fosforescentes

Líquido (monómero)

Líquido (monómero) Orthocryl® teñido en colores fosforescentes para la construcción de aparatos ortodónticos de colores intensivos. Acrílico autopolimerizable con amplio margen de elaboración para un empleo racional en ortodoncia. Fácil elaboración tanto para la técnica de rociado como para la técnica de mezcla polvo y líquido (polímero, REF 160-112-00/160-212-00). También es posible su empleo con micas Disco aumentando el efecto cromático.

REF 160-700-00	1 surtido
<b>CE 0483</b> <b>Contenido:</b>	
1 kg Polvo (polímero) Orthocryl®, incoloro	REF 160-112-00
250 ml Líquido Orthocryl® (monómero), amarillo-neón	REF 161-135-00
250 ml Líquido Orthocryl® (monómero), naranja-neón	REF 161-136-00
250 ml Líquido Orthocryl® (monómero), fucsia-neón	REF 161-137-00
250 ml Líquido Orthocryl® (monómero), verde-neón	REF 161-138-00
1 x Embudo	REF 162-600-00



**NUEVO**

## Orthocryl® / Envases individuales



### Orthocryl®

#### Polvo (polímero)

Acrílico autopolimerizable con amplio margen de elaboración para un empleo racional en ortodoncia.

**Optima estabilidad al emplearlo en la técnica de rociado.**

También muy apropiado para la técnica de mezcla polvo y líquido.

Color	REF	Cantidad	REF	Cantidad
incoloro	<b>160-112-00</b>	1 kg	<b>160-212-00</b>	10 kg

CE 0483



### Orthocryl® EQ

#### Polvo (polímero)

Acrílico autopolimerizable con amplio margen de elaboración para un empleo racional en ortodoncia.

**Optima fluidez al emplearlo en la técnica de mezcla polvo y líquido.**

También muy apropiado para la técnica de rociado.

Color	REF	Cantidad	REF	Cantidad
incoloro	<b>160-300-00</b>	1 kg	<b>160-301-00</b>	10 kg

CE 0483



### Orthocryl® black & white

#### Polvo (polímero), opaco

Acrílico autopolimerizable con amplio margen de elaboración para un empleo racional en ortodoncia.

**Optima estabilidad al emplearlo en la técnica de rociado.**

También muy apropiado para la técnica de mezcla polvo y líquido.

Color	REF	Cantidad	REF	Cantidad
negro	<b>160-011-00</b>	200 g	<b>160-013-00</b>	1 kg
blanco	<b>160-012-00</b>	200 g	<b>160-014-00</b>	1 kg

CE 0483



### Orthocryl® Neon

#### Acrílicos de colores fosforescentes

#### Líquido (monómero)

Líquido (monómero) Orthocryl® teñido en colores fosforescentes para la construcción de aparatos ortodónticos de colores intensivos. Acrílico autopolimerizable con amplio margen de elaboración para un empleo racional en ortodoncia. Fácil elaboración tanto para la técnica de rociado como para la técnica de mezcla polvo y líquido (polímero, REF 160-112-00/160-212-00). También es posible su empleo con mica Disco aumentando el efecto cromático.

Color	REF	Cantidad
amarillo-neón	<b>161-135-00</b>	250 ml
naranja-neón	<b>161-136-00</b>	250 ml
fucsia-neón	<b>161-137-00</b>	250 ml
verde-neón	<b>161-138-00</b>	250 ml

CE 0483

**NUEVO**

### Orthocryl®

#### Líquido (monómero)

Acrílico autopolimerizable con amplio margen de elaboración para un empleo racional en ortodoncia.

Color	REF	Cantidad	REF	Cantidad	REF	Cantidad
rojo	<b>161-127-00</b>	250 ml				
verde	<b>161-128-00</b>	250 ml				
azul	<b>161-129-00</b>	250 ml				
amarillo	<b>161-130-00</b>	250 ml				
turquesa	<b>161-131-00</b>	250 ml				
fucsia	<b>161-132-00</b>	250 ml				
verde esmeralda	<b>161-133-00</b>	250 ml				
violeta	<b>161-134-00</b>	250 ml				
incoloro			<b>161-100-00</b>	500 ml	<b>161-150-00</b>	1.000 ml
rosa transparente			<b>161-300-00</b>	500 ml	<b>161-350-00</b>	1.000 ml



CE 0483

**NUEVO**

### Orthocryl®

#### Concentrados de colorantes

Para teñir el líquido Orthocryl® incoloro (monómero, REF 161-100-00 / 161-150-00). Con 1 pipeta dosificadora.

Color	Proporción de mezcla	REF	Cantidad
rojo	1 : 10	<b>161-620-00</b>	100 ml
verde	1 : 20	<b>161-621-00</b>	100 ml
azul	1 : 50	<b>161-622-00</b>	100 ml
amarillo	1 : 25	<b>161-623-00</b>	100 ml



CE 0483

#### Proporciones de mezcla:

	Líquido, incoloro	Concentrado de colorante	Líquido, incoloro	Concentrado de colorante
<b>1 : 10 (rojo)</b>	100 ml	10 ml	50 ml	5 ml
<b>1 : 20 (verde)</b>	100 ml	5 ml	50 ml	2,5 ml
<b>1 : 50 (azul)</b>	100 ml	2 ml	50 ml	1 ml
<b>1 : 25 (amarillo)</b>	100 ml	4 ml	50 ml	2 ml

**DENTAURUM**  
**ONLINE SHOP**  
shop.dentaurum.com



## Mica Disco



### Mica Disco para Orthocryl®

Para teñir aparatos ortodónticos removibles. La mica se mezcla con el polvo (polímero) Orthocryl®, de acuerdo con la intensidad deseada, obteniendo entonces el brillo de la mica. El modo de empleo normal del Orthocryl® no se modifica con la adición de la mica. Las placas se tallan y pulen normalmente sin problemas.

#### Proporción de mezcla:

0,5 : 100 (componentes del volumen mica : polvo)

Color	REF	Cantidad
iris	161-605-00	50 g
rojo	161-606-00	50 g
azul	161-607-00	50 g
plateado	161-608-00	50 g
oro	161-609-00	50 g
nácar	161-611-00	50 g



### Surtido de figuritas

Para aparatos ortodónticos removibles. Para incorporar en el acrílico Orthocryl®. Así cada aparato puede ser construido de forma individual en cada caso.

#### Forma de suministro:

El surtido consta de 20 motivos de 20 piezas = 400 piezas incl. las pinzas.

REF 160-100-00	1 surtido
<b>CE</b>	
20 x Cocodrilo	REF 160-100-01
20 x Rana	REF 160-100-02
20 x Papagayo	REF 160-100-04
20 x Mariquita	REF 160-100-05
20 x Dragón	REF 160-100-06
20 x Pez	REF 160-100-07
20 x Fórmula 1	REF 160-100-09
20 x Elefante	REF 160-100-10
20 x Corazón	REF 160-100-11
20 x Pato	REF 160-100-12
20 x Dinosaurio	REF 160-100-13
20 x Motocicleta	REF 160-100-14
20 x Caracol	REF 160-100-15
20 x Osito	REF 160-100-16
20 x Hongos	REF 160-100-18
20 x Auto	REF 160-100-19
20 x Cuervo	REF 160-100-27
20 x Diablo	REF 160-100-29
20 x Futbolista	REF 160-100-31
20 x Ratón	REF 160-100-45



### Figura "Fútbol"

#### Pliego con dos tamaños diferentes del motivo

Para aparatos ortodónticos removibles. Para incorporar en el acrílico Orthocryl®.

Así cada aparato puede ser construido de forma individual en cada caso.

Motivo	REF	Cantidad
Fútbol	160-100-39	1 pliego = 20 piezas



CE

### Figura "Castor"

Para aparatos ortodónticos removibles. Para incorporar en el acrílico Orthocryl®.

Así cada aparato puede ser construido de forma individual en cada caso.

Motivo	REF	Cantidad
Castor	160-100-40	1 pliego = 20 piezas



CE

### Figura "Black Edition"

Para aparatos ortodónticos removibles. Para incorporar en el acrílico Orthocryl®.

Así cada aparato puede ser construido de forma individual en cada caso.

Motivo	REF	Cantidad
Black Edition	160-100-41	1 pliego = 12 motivos



CE

## Figuritas

### Figura

Para aparatos ortodónticos removibles. Para incorporar en el acrílico Orthocryl®.  
Así cada aparato puede ser construido de forma individual en cada caso.



Motivo	REF	Cantidad
Hola Castor	160-100-42	2 pliegos = 20 piezas
Caballo	160-100-43	2 pliegos = 20 piezas
Pink Pony	160-100-44	2 pliegos = 20 piezas
Unicornio	160-100-46	2 pliegos = 20 piezas

CE

**NUEVO**

### Figura

Para aparatos ortodónticos removibles. Para incorporar en el acrílico Orthocryl®.  
Así cada aparato puede ser construido de forma individual en cada caso.



Motivo	REF	Cantidad
Cocodrilo	160-100-01	20 piezas
Rana	160-100-02	20 piezas
Papagayo	160-100-04	20 piezas

CE

**Figura**

Para aparatos ortodónticos removibles. Para incorporar en el acrílico Orthocryl®.

Así cada aparato puede ser construido de forma individual en cada caso.

Motivo	REF	Cantidad
Mariquita	160-100-05	20 piezas
Dragón	160-100-06	20 piezas
Pez	160-100-07	20 piezas
Fórmula 1	160-100-09	20 piezas
Elefante	160-100-10	20 piezas
Corazón	160-100-11	20 piezas
Pato	160-100-12	20 piezas
Dinosaurio	160-100-13	20 piezas
Motocicleta	160-100-14	20 piezas
Caracol	160-100-15	20 piezas



## Figuritas

### Figura

Para aparatos ortodónticos removibles. Para incorporar en el acrílico Orthocryl®.

Así cada aparato puede ser construido de forma individual en cada caso.



Motivo	REF	Cantidad
Osito	<b>160-100-16</b>	20 piezas
Hongos	<b>160-100-18</b>	20 piezas
Coche	<b>160-100-19</b>	20 piezas
Cuervo	<b>160-100-27</b>	20 piezas
Araña	<b>160-100-28</b>	20 piezas
Diablo	<b>160-100-29</b>	20 piezas
Graffiti	<b>160-100-30</b>	20 piezas
Futbolista	<b>160-100-31</b>	20 piezas
Ratón	<b>160-100-45</b>	20 piezas
Delfin	<b>160-100-34</b>	20 piezas





### Frasco para rociar

Para polvo (polímero) y líquido (monómero).

Cabida	REF	Cantidad
100 ml	162-100-00	1 pieza



### Aguja para rociar líquido (monómero) Orthocryl®

ø interior	Longitud	REF	Cantidad
0,40 mm	10 mm	162-752-00	12 piezas



### Boquilla para rociar polvo (polímero) Orthocryl®

REF 162-751-00	1 pieza
----------------	---------



### Taza de silicona para mezclar

Flexible, con base de succión. Para todo tipo de trabajos de mezcla en la clínica dental y en el laboratorio.

**¡No apropiadas para pasta de silicona!**

Cabida	REF	Cantidad
5 ml	162-501-00	3 piezas
25 ml	162-502-00	1 pieza
75 ml	162-503-00	1 pieza



### Embudo

REF 162-600-00	1 pieza
----------------	---------



### Vaso graduado para mediciones

REF 162-200-00	1 pieza
----------------	---------



### Pipeta dosificadora

Para concentrados de colorantes Orthocryl®.

REF 162-101-00	10 piezas
----------------	-----------



## Accesorios



### Barniz aislante

Aislante especial a base de alginato para modelos de yeso, formándose una fina película aislante, resistente a la abrasión.

#### Aisla:

- yeso contra acrílicos
- yeso contra yeso

Color	REF	Cantidad
rosa	162-800-00	1.000 ml



### Cera para modelar

Para la técnica de acrílicos, la construcción de mordidas, etc.

- se modela muy bien
- muy buena moldeabilidad
- estable hasta los 37 °C aproximadamente
- fácil fijación de dientes

Punto de fusión	Dimensiones (longitud x anchura)	Grosor	Color	REF	Cantidad
60 °C	175 x 80 mm	1,5 mm	rosa	119-150-00	500 g



### Cera térmica

- cera para alivios, resistente al calor
- para el recubrimiento de resortes en la técnica Orthocryl®
- impide que el acrílico adquiera lechosisidad

Punto de fusión	Color	REF	Cantidad
87 °C	rosa	120-170-00	50 g



### Cera adhesiva

- buena adherencia sobre todos los materiales
- ideal para fijar elementos de retención y apoyo, trabajos de reparación y de soldadura

Punto de fusión	Color	REF	Cantidad
71 °C	roja	122-300-00	60 g

### Fresas para acrílicos

#### fresa dentada, recta

- propiedades de corte con arranque de virutas

**Aplicación:** acrílicos

Máximo número de revoluciones: 15.000 min<sup>-1</sup>

Número ISO	Tamaño	Forma	REF	Cantidad
310.104.266.171.040	pequeño	capullo, redondo, largo	<b>180-201-00</b>	1 pieza
310.104.266.171.050	mediano	capullo, redondo, largo	<b>180-202-00</b>	1 pieza
310.104.260.171.070	mediano	capullo, redondo	<b>180-304-00</b>	1 pieza
310.104.260.171.080	grande	capullo, redondo	<b>180-305-00</b>	1 pieza



### Fresa de metal superduro

#### dentado cruzado, grueso

- fresado de precisión
- las mejores propiedades de corte

**Aplicación:** yeso, acrílicos

Número de revoluciones recomendado: 15.000–20.000 min<sup>-1</sup>

Máximo número de revoluciones: 30.000 min<sup>-1</sup>

Número ISO	Forma	REF	Cantidad
500.104.263.190.070	capullo, redondo, delgado	<b>180-308-00</b>	1 pieza



## Accesorios

### Fresas/Taladros de metal superduro

#### dentado cruzado, grueso

- fresado de precisión
- las mejores propiedades de corte

**Aplicación:** acrílicos, esqueléticos

Número de revoluciones recomendado: 20.000–25.000 min<sup>-1</sup>

Máximo número de revoluciones: 50.000 min<sup>-1</sup>



Número ISO	Forma	REF	Cantidad
500.104.116.190.023	cilíndrica, sólo con corte lateral	<b>123-580-00</b>	1 pieza
500.104.137.190.023	cilíndrica, lado frontal redondo	<b>123-581-00</b>	1 pieza
500.104.292.190.023	torpedo, cilíndrica	<b>123-582-00</b>	1 pieza
500.104.001.190.023	forma esférica (redonda), ø 2,1 mm	<b>123-583-00</b>	1 pieza
500.104.274.190.060	granada	<b>123-584-00</b>	1 pieza
500.104.194.190.023	cónica, lado frontal redondo	<b>123-585-00</b>	1 pieza



### Fresa de metal superduro

#### dentado cruzado, grueso

- fresado de precisión
- las mejores propiedades de corte

**Aplicación:** yeso, acrílicos

Número de revoluciones recomendado: 20.000–25.000 min<sup>-1</sup>

Máximo número de revoluciones: 30.000 min<sup>-1</sup>



Número ISO	Forma	REF	Cantidad
500.104.237.220.060	pera	<b>123-594-00</b>	1 pieza
500.104.194.220.060	cónica, lado frontal redondo	<b>123-596-00</b>	1 pieza



### Fresas de metal superduro

#### fresas con dentado torcido hacia la derecha

- carburo de tungsteno
- rectificado de precisión
- las mejores propiedades de corte

**Aplicación:** aleaciones de CoCr, acrílicos

Número de revoluciones recomendado: 20.000–25.000 min<sup>-1</sup>

Máximo número de revoluciones: 30.000 min<sup>-1</sup>

Número ISO	Forma	REF	Cantidad
500.104.274.175.060	granada	123-597-00	1 pieza
500.104.194.175.045	cónica, lado frontal redondo	123-598-00	1 pieza



### Sierra de arco

Para ortodoncia maxilar/prótesis dental.

Pequeña y manejable sierra de arco con hojas de sierra intercambiables.

**Forma de suministro:**

Sierra con 3 hojas de sierra intercambiables para repuesto

REF 180-702-00

1 pieza



### Hoja de sierra

Para sierra de arco.

Longitud	REF	Cantidad
70 mm	180-703-00	5 piezas



### Cepillo para pulir

Para pulidora.

**Aplicación:** ortodoncia, coronas y puentes, prótesis acrílica, esqueléticos

Máximo número de revoluciones: 2.800 min<sup>-1</sup>

ø	REF	Cantidad	REF	Cantidad
50 mm	141-700-00	1 pieza	141-700-10	10 piezas



### Cepillo para pulir

Combinación de cerdas Chungking/tela, para pulidora.

**Aplicación:** ortodoncia, coronas y puentes, prótesis acrílica

Máximo número de revoluciones: 1.500 min<sup>-1</sup>

ø	REF	Cantidad
80 mm	141-710-00	1 pieza



## Accesorios



### Cepillo para pulir

Cerdas cortas tipo Chungking, para pulidora.

**Aplicación:** ortodoncia, coronas y puentes, esqueléticos

Máximo número de revoluciones: 6.000 min<sup>-1</sup>

Número de hileras	∅	REF	Cantidad
2	60 mm	141-711-00	10 piezas
3	60 mm	141-712-00	10 piezas



### Cepillo palatino de cabeza redonda

Cerdas Chungking, para pulidora.

**Aplicación:** ortodoncia, prótesis acrílica

Máximo número de revoluciones: 3.000 min<sup>-1</sup>

∅	REF	Cantidad	REF	Cantidad
30 mm	141-713-10	1 pieza	141-713-00	10 piezas



### Cepillo de tela montado

Para pieza de mano.

**Aplicación:** ortodoncia, coronas y puentes, prótesis acrílica, esqueléticos

Número de revoluciones recomendado: 1.500–4.000 min<sup>-1</sup>

Máximo número de revoluciones: 5.000 min<sup>-1</sup>

∅	REF	Cantidad
20 mm	181-100-01	6 piezas



### Cepillo de tela

Para pulidora.

**Aplicación:** ortodoncia, coronas y puentes, prótesis acrílica, esqueléticos

Máximo número de revoluciones: 5.000 min<sup>-1</sup>

∅	REF	Cantidad
100 mm	181-200-00	1 pieza



### Cepillo de tela de gamuza

Para pulido brillante, para pulidora.

**Aplicación:** ortodoncia, coronas y puentes, prótesis acrílica, esqueléticos

Máximo número de revoluciones: 1.500 min<sup>-1</sup>

∅	REF	Cantidad
90 mm	181-201-00	1 pieza

### Pasta Edelweiss para pulir acrílico en seco

REF 190-100-00
----------------

80 g
------



### Líquido Edelweiss para pulir acrílico

REF 190-200-00
----------------

1.000 g
---------



### Pulidor de silicona montados

- no deterioran las partes metálicas ni los elementos de alambre

**Aplicación:** aparatos de ortodónticos, pulido previo del acrílico en colados de esqueléticos, rebases blandos duraderos

Número de revoluciones recomendado: 10.000 min<sup>-1</sup>

Máximo número de revoluciones: 15.000 min<sup>-1</sup>

Número ISO	Forma	REF	Cantidad
658.104.201.524.150	cónica, lado frontal redondo	<b>138-620-00</b>	10 piezas
658.104.497.524.100	capullo, oval	<b>138-623-00</b>	10 piezas



### Mandril

Versión	Máximo número de revoluciones	REF	Cantidad
para cinta esmerilada	16.000 min <sup>-1</sup>	<b>139-500-00</b>	10 piezas



### Cinta de esmerilar

Granulación	Anchura	REF	Cantidad
120 = fina	15 mm	<b>140-015-00</b>	25 m



## Accesorios



### Oclusor fijador desmontable para ortopedia maxilar

según Gordon

Aparato auxiliar manejable para fijar con toda exactitud los modelos en la posición de mordida deseada. Con doble guía de barras telescópicas redondas. Los modelos fijados en yeso pueden ser desmontados del aparato y montados de nuevo con toda facilidad.

REF 072-004-00	1 pieza
----------------	---------



### Polyclav®

Recipiente de presión para la polimerización de acrílicos autopolimerizables, como p. ej. Orthocryl®.

Con válvula de seguridad.

**Sin manguera de presión.**

Cabida: 4 l

REF 070-000-00	1 pieza
----------------	---------



### Manguera de presión

Para Polyclav® (REF 070-000-00).

Longitud: 2 m

Con racor adecuado a la válvula de admisión, así como conexión normalizada para aire comprimido.

REF 070-700-00	1 pieza
----------------	---------



### Hornillo

Para Polyclav® (REF 070-000-00).

Tensión de la red	REF	Cantidad
230 V~	070-900-00	1 pieza

#### Datos técnicos

Potencia	125 W
Temperatura del agua regulada por termostato	43 °C
Frecuencia de la red	50/60 Hz
Peso	2,6 kg
Dimensiones (anchura x altura x profundidad)	240 x 240 x 75 mm



### Aparato aspirador con filtro de carbón activo

Para la protección contra vapores al trabajar con acrílicos en el laboratorio.

- aparato regulado por barrera de luz (se conecta y desconecta automáticamente)
- con contador de horas de servicio
- cambio sencillo del filtro (cambiar casete con filtro, REF 072-001-30, después de unas 50 horas de funcionamiento)

Tensión de la red	REF	Cantidad
230 V~	072-001-00	1 pieza

#### Datos técnicos

Potencia	100 W
Frecuencia de la red	50 Hz
Peso	6 kg
Dimensiones (anchura x altura x profundidad)	220 x 260 x 260 mm



### Aparato de limpieza activeblue®

Con líquido de limpieza activefluid®.

Para la eliminación suave de placa en aparatos ortodónticos removibles.

#### Forma de suministro:

- 1 x líquido de limpieza, 400 ml
- 1 x vaso de limpieza blanco
- 1 x agujas de limpieza, 75 g, REF 098-001-00
- 1 x pinzas
- 1 x imán de soporte
- 1 x cable de alimentación -230 V

#### Datos técnicos

Tensión de la red	100–240 V~ con 50/60 Hz
Número de revoluciones	1200 / 1600 / 2000 min <sup>-1</sup>
Fusibles de red	T 1,6 A L 250 V
Nivel de ruido	< 70 dB (A)
Peso	3 kg
Dimensiones (anchura x altura x profundidad)	150 x 240 x 280 mm

REF 098-000-00

1 pieza



### Agujas de limpieza para activeblue®

Para aparato de limpieza activeblue®.

REF 098-001-00

1 tarro à 75 g



### Líquido de limpieza activefluid®

Para aparato de limpieza activeblue®.

REF 150-020-00

1.000 ml



### Caja de guantes de protección desechables Dermatril®

Para la protección durante la elaboración de polimetacrilatos de metilo como Orthocryl®.

Fabricados de nitrilo especial, exentos de polvo y de látex natural.

Espesor de la capa	Tamaño	REF	Cantidad
0,10 mm	S	162-907-00	100 piezas
0,10 mm	M	162-908-00	100 piezas
0,10 mm	L	162-909-00	100 piezas

